

Instrukcja używania
Recliner Extra
Wózek inwalidzki specjalny
VCWK702
Wydanie EJ 08.2023

VITEA®
CARE

Instructions for use
Recliner Extra
Special wheelchair stabilizing back and head
VCWK702
Edition EJ 08.2023



CE

Spis treści / Table of contents

1. Wstęp / Introduction.....	3
2. Opis produktu / Product description.....	3
3. Wskazania / Indications.....	6
4. Przeciwwskazania / Contraindications	6
5. Użytkowanie / Usage	6
7. Czynności obsługi i konserwacji / Everyday use and maintenance	14
8. Parametry techniczne / Technical paramets	26
9. Symbole / Symbol	27
10. Dane teleadresowe / Contact details.....	28

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE
CAŁĄ INSTRUKCJĘ

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING
WHOLE OF INSTRUCTIONS

1. Wstęp / Introduction

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Jesteśmy głęboko przekonani, że spełni Państwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem przed pierwszym użytkowaniem. Niniejsza instrukcja przekazana jest w celu przedstawienia niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia. Prawidłowe zastosowanie się do zaleceń znacząco przyczyni się do przedłużenia trwałości i estetyki wyrobu. Pragniemy zaznaczyć, że na bieżąco staramy się poprawiać jakość naszych produktów, co może skutkować drobnymi zmianami, które nie są zawarte w instrukcji.

Thank you for choosing our product. We are deeply convinced that it will meet your expectations. Please read this document before first use. This manual was made in order to provide the necessary information on the safe use of the device. The correct application of the recommendations will contribute significantly to extend the durability and aesthetics of the product. We want to distinguish that to date we are trying to improve the quality of our products, which may result in minor changes that are not included in the manual.

2. Opis produktu / Product description



Ilustracja /Illustration 1.

1. Podwyższone oparcie (opcjonalne)
2. Zagłówek
3. Rączka
4. Dźwignia hamulca
5. Dźwignia regulacji kąta oparcia
6. Pokrętło stabilizacji oparcia

1. Higher backrest (optional)
2. Headrest
3. Handle holder
4. Brake handle for caretaker
5. Lever backrest
6. Stabilization backrest knob

7. Podłokietnik
8. Opona koła tylnego
9. Ciągi metalowe
10. Szybkozłączka koła tylnego
11. Kółka antywywrotne
12. Widelec koła przedniego
13. Koło przednie
14. Oparcie nylonowe
15. Płyta boczna podłokietnika
16. Poduszka siedziska
17. Dźwignia hamulca postojowego
18. Rama siedziska
19. Hamulec
20. Uchwyt opuszczania podnóżka
21. Oparcie łydek
22. Platforma podnóżka

7. Armrest
8. Rear wheels
9. Metal handrim
10. Quick connect handle
11. Anti-tip wheels
12. Front wheel fork
13. Front wheel
14. Backrest
15. Side plate of the armrest
16. Seat cushion
17. Parking brake lever
18. Seat frame
19. Brake
20. Handle lowering footrest
21. Backrest calves
22. Footrest platform

Wykaz elementów znajdujących się wewnątrz opakowania

Elements that should be inside the packaging:



Ilustracja / Illustration 2. Podwyższone oparcie / Higher backrest



Ilustracja / Illustration 3. (ten element dotyczy wyposażenia opcjonalnego) Zagłówek / (This element is optional) Headrest



Ilustracja / Illustration 4. Poduszka siedziska / Seat cushion



Ramię bezpieczeństwa /
Safety arm

Ilustracja / Illustration 5. Podłokietniki / Armrest



Ilustracja / Illustration 6. Dwa podnóżki / Two footrests



Ilustracja / Illustration 7. Wózek / Wheelchair

3. Wskazania / Indications

Wózek inwalidzki służy do indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych, czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

The wheelchair is used in order to commute by people with disabilities e.g. after the spinal cord damages, cerebral palsy or various lower limb injuries, neuromuscular diseases, post-traumatic cranial cerebral or for geriatric patients.

It is also intended for people who want to actively and comfortably participate in everyday life.



4. Przeciwwskazania / Contraindications

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej.

Contraindications to a sitting position

5. Użytkowanie / Usage

- Po rozpakowaniu opakowania należy sprawdzić czy zawiera ono wszystkie części zgodnie z wykazem elementów zamieszczonym powyżej.
- Należy upewnić się, że wszystkie elementy nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z wytwórcą.
- Nie należy korzystać wózków dopóki wszystkie elementy nie zostaną właściwie połączone.

- After unpacking the package, check if it contains all parts in accordance with the list of elements set out above.
- Ensure that all components have no visible damage. If any doubts, please contact the manufacturer.
- Do not use the wheelchair until all parts are properly connected.

ROZKŁADANIE WÓZKA.

- Wózek należy ustawić tylnymi kółkami do siebie.
- Rozchylić rączki wózka w kierunku do zewnątrz (Ilustracja 8.).

UNFOLDING THE WHEELCHAIR

- The wheelchair must be placed with rear wheels in front to You.
- Unfold the handle holder towards the outside

- Ustawić wózek przednimi kółkami do siebie.
- Ramy siedziska należy docisnąć aż do całkowitego rozłożenia wózka. (Ilustracja 9., 10.)

(Illustration 8.).

- Then place wheelchair with front wheels in front of you.
- Press seat frames, until complete unfolding. (Illustration 9., 10.)



Ilustracja / Illustration 8.



Ilustracja / Illustration 9.




Ilustracja / Illustration 10.

- Następnie należy opuścić do pozycji poziomej barierkę stabilizującą wózek (Ilustracja 11.)
- Barierkę stabilizującą należy zablokować obracając blokadę o 45°. (Ilustracja 12.)
- Aby odblokować barierkę należy obrócić blokadę o 45°.

- Then should lower the stabilizing barrier to the horizontal position (Illustration 11.)
- Stabilizing barrier has to be locked, by turning the lock by 45°. (Illustration 12.)
- To unlock the stabilizing barrier, turn lock by 45°.

Barierka stabilizująca/
Stabilizing barrier

Blokada /
Blockade

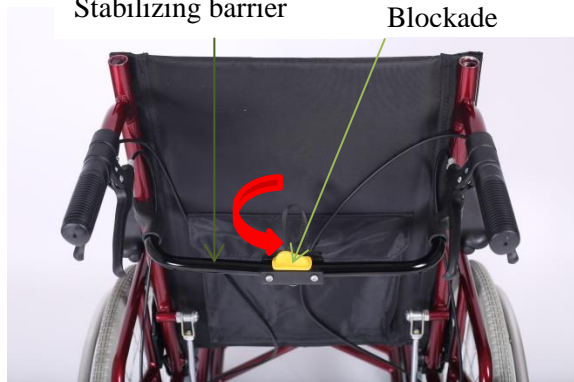

Ilustracja / Illustration 11.



Ilustracja / Illustration 12.


- Podłokietniki należy zamontować w otworach znajdujących się przy bocznej krawędzi siedziska, w ten sposób, aby ramię bezpieczeństwa podłokietnika znajdowało się w tylnej części wózka, natomiast przycisk

- Armrests should to be mounted in openings at a side edge of the seat. Armrest safety arm has to be faced to wheelchair rear part, and Height adjustment button has to be faced to the outer side of the wheelchair.

regulacji wysokości aby był skierowany na zewnątrz wózka.

- Aby podłokietnik był właściwie zamocowany należy pociągnąć blokadę podłokietnika zlokalizowaną w tylnej części wózka i docisnąć tylną krawędź podłokietnika (Ilustracja 13.).
- Następnie należy nacisnąć dźwignię podłokietnika zlokalizowaną w przedniej części podłokietnika oraz nacisnąć przednią krawędź podłokietnika (Ilustracja 14.).
- Procedurę należy wykonać dla obu podłokietników.
- Należy upewnić się że oba podłokietniki zostały właściwie zamocowane.
- Aby zdjąć podłokietniki należy przycisnąć dźwignię podłokietnika w kierunku przedniej krawędzi podłokietnika, pociągnąć do góry przednią krawędź podłokietnika. Następnie pociągnąć blokadę podłokietnika i pociągnąć tylną krawędź podłokietnika do góry.

- In order to the armrest be properly attached, pull the armrest block located in wheelchair rear and press the rear edge of the armrest (Illustration. 13).
- Then press the armrest lever located in the armrest front part and press armrest front edge. (Illustration 14).
- Procedure should be performed for both armrests.
- Make sure, that both armrests are assembled properly.
- In order to remove the armrests, press the armrest lever toward the front edge of the armrest, lift up the front edge of the armrest. Then pull the armrest lock and lift the rear edge of the armrest up.

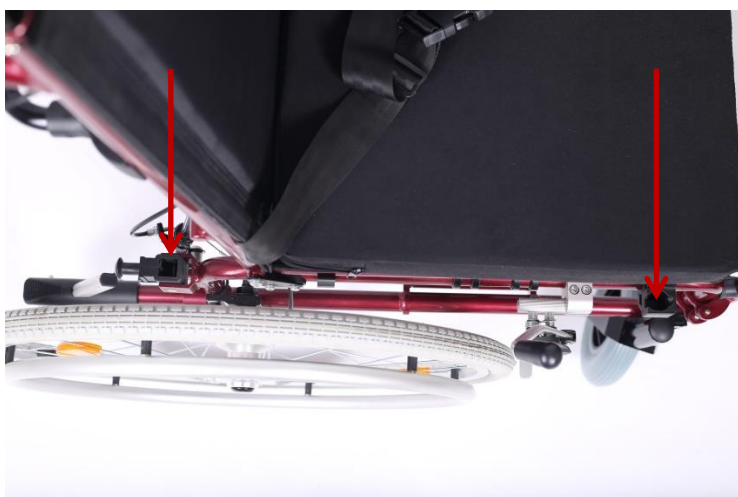

Ilustracja / Illustration 13.

Blokada podłokietnika /
Armrest block



Ilustracja / Illustration 14.



Ilustracja/ Illustration 15.

- Następnie należy przymocować podwyższone oparcie. W otwory zlokalizowane w tylnej części oparcia należy umieścić ramy podwyższonego oparcia. (Ilustracja 16., 17.)
- Zagłówek przymocować do podwyższonego oparcia za pomocą rzepa na wysokości dogodnej dla pacjenta.
- Przymocować poduszkę siedziska za pomocą rzepa.
- Aby zdemontować podwyższone oparcie należy przycisnąć dwa trzpienie zlokalizowane na ramach oparcia i pociągnąć podwyższone oparcie do góry.



Ilustracja\ Illustration 16.


- Then attach the higher backrest. Into the holes located in the rear part of the backrest should insert higher backrest frame. (Illustration 16., 17.)
- Headrest should attach to the higher backrest by using Velcro, on height convenient for the patient.
- Fasten the seat cushion using velcro.
- In order to remove the higher backrest, press the two pins located on the backrest frames and pull up the higher backrest.



Ilustracja/ Illustration 17.

- Aby zamocować podnóżki, należy umieścić otwory montażowe w trzpieniach ustalających (Ilustracja 18., 19.), następnie obrócić podnóżki maksymalnie do wewnątrz aż do momentu zablokowania blokady podnóżka i słyszalnego charakterystycznego kliknięcia.
- Należy rozłożyć podparcie łydek oraz platformę podnóżka.
- Aby opuścić podnóżek należy zwolnić dźwignię podnóżka (Ilustracja 19.).
- W celu zdjęcia podnóżka należy opuścić go, a następnie odchylić mechanizm zatraskowy do zewnątrz wraz z całym podnóżkiem.


- To install footrests, place the mounting holes in the indexing plungers (Illustration 18., 19.), then rotate footrests into wheelchair front until it locks (you will hear click).
- Unfold the footrests platform.
- To lower the footrest, release the footrest lever. (Illustration 19.).
- In order to remove the footrest, lower the footrest and tilt the latching mechanism outwards with the whole footrest.

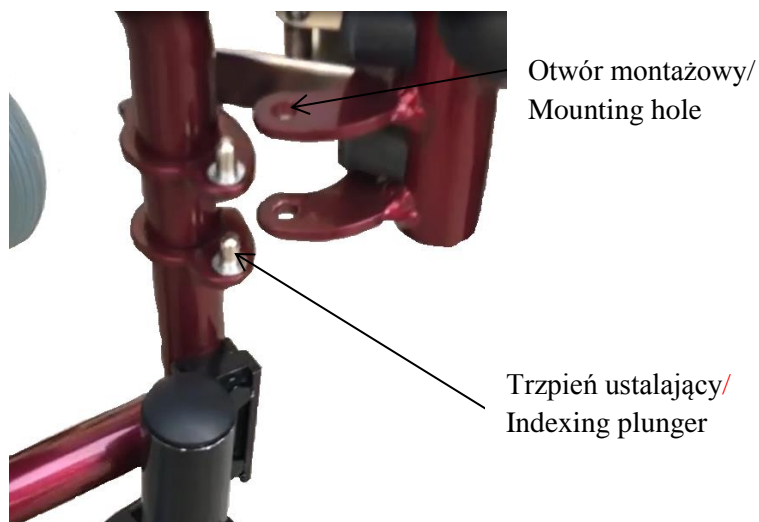

Ilustracja /Illustration 18.



Ilustracja/ Illustration 19.

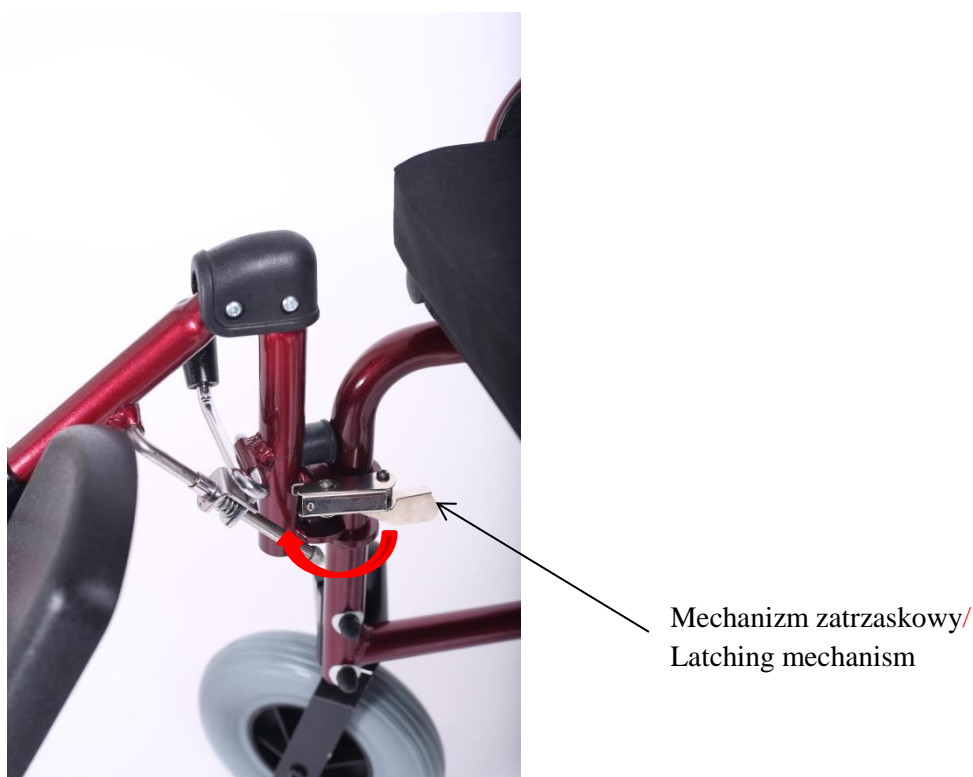

Ilustracja/Illustration 20.



6. Bezpieczeństwo użytkowania / Safety of use

OSTRZEŻENIE! / WARNING!

- Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość.
- Przy wsiadaniu i zsiadaniu z wózka należy zaciągnąć hamulce!
- Przed przystąpieniem do siadania lub wysiadania z wózka nie wolno stawać na płytę podnóżka, wcześniej należy je złożyć lub

- Before using the wheelchair refer to this manual and keep it for future reference.
- While getting on and out of the wheelchair, the brakes always have to be on!
- Before getting on or getting off the wheelchair, do not stand on the footrest, you must fold or completely set aside footrests first.

- całkowicie odsunąć na bok podnóżki
- d) Pacjenci wymagający dodatkowej stabilizacji głowy powinni poruszać się wózkiem TYLKO pod opieką doświadczonego opiekuna.
 - e) Niedopuszczalne jest przenoszenie wózka wraz z użytkownikiem.
 - f) W przypadku przemieszczania wózka przez drzwi i inne przejścia, należy upewnić się, że po obydwu stronach jest wystarczająco dużo miejsca, aby uniknąć zranienia rąk lub uszkodzenia wózka.
 - g) Korzystając z dróg publicznych, należy stosować się do przepisów ruchu drogowego.
 - h) Podobnie jak w przypadku innych pojazdów, nie należy jeździć wózkiem pod wpływem alkoholu lub innych leków, czy środków odurzających. Dotyczy to również jazdy wewnątrz pomieszczeń.
 - i) Wózek nie jest przeznaczony do transportu pacjenta po schodach, w charakterze noszy lub poprzez wciąganie lub opuszczanie na nim pacjenta. Konstrukcja wózka i elementy łączące nie są przystosowane do tak dużych przeciążeń jeżeli jest użytkowany w ten sposób, grozi to osłabieniem lub uszkodzeniem całej konstrukcji nośnej wózka i możliwym wypadkiem !
 - j) Wózek przeznaczony do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń wyłącznie po utwardzonych i równych powierzchniach,
 - k) Użytkowanie wyrobu na podłożu nie dającym pewnego oparcia dla użytkownika tj. oblodzone, mokre, tłuste, silnie zapiaszczone jest niedopuszczalne. – ryzyko upadku,
 - l) Z wózka można korzystać jedynie na powierzchniach, na których wszystkie cztery koła wózka dotykają podłoża oraz kontakt jest wystarczający aby odpowiednio napędzać koła.
 - m) Do pokonywania trudnych barier architektonicznych (strome lub długie podjazdy wysokie stopnie, itp.) niezbędna jest pomoc opiekuna.
 - n) Jeżeli użytkownik nie posiada wystarczającego doświadczenia w korzystaniu z wózka, należy poprosić opiekuna o pomoc przy pokonywaniu przeszkód.
 - o) Nie pozostawiać wózka wraz z użytkownikiem w bezpośrednim pobliżu otwartego źródła ognia.
 - p) Należy pamiętać, że temperatura powierzchniowa tapicerki i elementów ramy
- d) Patients who require additional head stabilisation should drive the wheelchair only with assistance of a caregiver .
 - e) Lifting the wheelchair together with the user is strictly forbidden!
 - f) When moving through doors and other passages, make sure that on both sides there is enough space to avoid injury to the hands or damage the wheelchair.
 - g) Using public roads, follow accurate traffic regulations.
 - h) Like other vehicles, do not drive the wheelchair under the influence of alcohol, or drugs. This also applies to indoor riding.
 - i) The wheelchair is not intended for patient transporting on stairs, just like on stretcher or by pulling or lowering the patient. The construction of the wheelchair and it joining elements are not designed for such a large overload if it is used in this way. This can cause weakness or damage of the entire structure supporting the wheelchair and possible accidents!
 - j) The wheelchair is designed to use indoors and outdoors only on hard and even surfaces.
 - k) Using the wheelchair on an unstable surface (covered with ice, wet, greasy, sandy) is unacceptable- it causes risk of falling,
 - l) You can only use the wheelchair on surfaces where all four wheels are touching the ground.
 - m) To overcome architectural barriers (steep or long climbs, thresholds or curbs, etc.) help of caretaker is needed.
 - n) If the user does not have sufficient experience in the wheelchair use, should ask caretaker for help with overcoming obstacles.
 - o) Do not leave the wheelchair with the user close to open sources of fire.

może wzrosnąć po wystawieniu na działanie słońca lub innego źródła ciepła, natomiast w niskich temperaturach zachodzi niebezpieczeństwo bardzo dużego wychłodzenia części metalowych wózka. To może być przyczyną oparzenia lub odmrożenia części ciała.

- q) Wózek należy przenosić chwytając za konstrukcję ramy siedziska. Nigdy nie należy przenosić wózka za podłokietniki lub za podnóżki.
- r) Wózek nie może być wykorzystywany do użycia jako siedzisko w pojeździe silnikowym (autobus, pociąg).
- s) Wózek przeznaczony jest dla osób o masie do 120 kg.
- t) Wózek powinien zawsze dać się łatwo składać i rozkładać. W przypadku problemów ze złożeniem należy ponownie zapoznać się z instrukcją, lub skontaktować się z wytwórcą.
- u) Poruszając się po powierzchniach pochyłych należy zachować szczególną ostrożność. Maksymalne dopuszczalne kąty nachylenia podłoża w górę i w dół wynoszą 5%.
- v) Hamulce nie służą do spowalniania wózka w trakcie ruchu, należy ich używać wyłącznie aby nie dopuścić do niepożądanych ruchów wózka.
- w) Oba hamulce powinny być właściwie wyregulowane. Nieprawidłowe ustawienie jednego z hamulców, skutkujące zablokowaniem tylko jednego koła tylnego, co na dużych pochyłościach może być przyczyną trudnego do opanowania obrócenia się wózka wokół koła zahamowanego.
- x) Należy regularnie kontrolować ciśnienie w oponach. Przy zbyt niskim ciśnieniu w oponach niż zalecane, skuteczność działania hamulców może znacznie się zmniejszyć!
- y) Podczas sięgania przedmiotów należy unikać nadmiernego wychylania się z wózka gdyż grozi to upadkiem (z boku, z przodu z tyłu).
- z) Wszelkie czynności takie jak wsiadanie, zsiadanie, zmiana pozycji pacjenta, postój wózka wymagają zablokowania hamulców kół jezdnych.
- aa) Nie należy pozostawiać pacjenta w wózku (nawet przy zaciągniętych hamulcach) na zjazdach, rampach, półpiętrach itp.
- bb) Należy każdorazowo po montażu kół sprawdzić czy zadziałała blokada osi łącznej koła, przy

p) Be aware that the surface temperature of the upholstery and the frame parts may be increased after exposure to the sun or other heat source. Furthermore, with low temperatures there is a danger of overcooling metal parts of wheelchair. It may cause burns or frostbite parts of the body.

- q) In order to transfer wheelchair, grab the frame. Never transfer the wheelchair by grabbing the armrests or footrest.
- r) Never use the wheelchair as a seat for the transportation of people in cars, buses or any motor vehicles.
- s) The wheelchair is designed for people up to 120 kg.
- t) Wheelchair must be easy to fold and to unfold. In case of problems with folding, you should re-read the instruction or contact the manufacturer.
- u) Keep caution while moving on sloping surfaces. The maximum allowable slope angle up and down is 5%.
- v) Brakes cannot be slow down the wheelchair during ride, You should use them only to prevent the unintended movements.
- w) Both brakes should be properly adjusted. Incorrect setting one of the brakes, results with blocking only one rear wheel. On large slopes, it can cause difficulty to control the rotation the wheelchair around the wheel stopped.
- x) Regularly check the tire pressure. With too low tire pressure than recommended, the brake performance can be significantly reduced!
- y) While reaching objects, avoid excessive leaning out the wheelchair because it can cause a fall (to the side, front, back).
- z) In order to avoid accidental rolling off the wheelchair, always put on the brakes when the wheelchair is stopped, when patient get in, get

- montażu powinno być słyszalne charakterystyczne kliknięcie zatrasku, dodatkowo należy silnie szarpnąć koło bez wciskania
- cc) Używanie hamulca postojowego podczas jazdy może grozić wypadkiem ze wszystkimi konsekwencjami.
 - dd) Zawsze po każdej regulacji, należy dokonać sprawdzenia poprawności działania hamulca.
 - ee) W przypadku zanieczyszczenia ogumienia kół poprzez oleje, smary, wodę czy inne środki może nastąpić zmniejszenie efektywności hamowania.
 - ff) Po długiej eksploatacji wózka może nastąpić osłabienie siły hamowania spowodowane powstaniem luzu między sworzniem dociskowym hamulca a oponą koła. Istnieje możliwość samodzielnego wyregulowania hamulców postojowych. W tym celu należy poluzować śruby blokujące położenie mechanizmu hamulca, przesunąć cały mechanizm w stronę koła do takiego położenia aby po ponownym załączeniu hamulca, koło nie obracało się (test poprawności regulacji przeprowadzić na wózku z pacjentem). Po zakończeniu regulacji ponownie zabezpieczyć położenie mechanizmu śrubami blokującymi.
 - gg) Dla zachowania parametrów użytkowych wózka niezmiernie ważne jest utrzymanie wszelkich jego elementów w czystości, oraz sposób przechowywania.
 - hh) Składowanie wózka w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności (łaznie, pralnie itp.), lub na wolnym powietrzu, w połączeniu z brakiem higieny spowoduje szybką utratę parametrów użytkowych i estetycznych wózka.
 - ii) Niedopuszczalne jest użytkowanie wózka, jeżeli zostały stwierdzone jakiegokolwiek widoczne lub wyczuwalne uszkodzenia, albo stopień zużycia się części wózka wskazuje na potencjalne ryzyko wystąpienia wypadku (np. zużycie kół jezdnych, pęknięcia tapicerki, itp). Wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi, a w okresie gwarancji tylko serwisowi producenta.
 - jj) W przypadku wózków wyposażonych w koła pompowane nie należy przekraczać maksymalnego, dopuszczalnego ciśnienia pompowania kół, wartość podana na oponie koła.
- off, while changing the position.
- aa) Do not leave the patient in the wheelchair (even with turned on both brakes) on the descents, ramps, landings, etc.
 - bb) It is necessary to check after each wheel mount if wheel axle connector lock works properly. While mounting should hear “click” of the latch. Pull strongly the wheel to check if it is installed correctly.
 - cc) Using the parking brake while driving may result with an accident with all its consequences.
 - dd) After each wheelchair adjustment, it is always necessary to check the correct operation of the brake.
 - ee) Oil, grease, water or other chemicals, may cause that brakes may have reduced effectiveness.
 - ff) Strength of the breaking intensity may be reduced after long exploitation of the wheelchair. You are allowed to adjust breaks yourself. In order to do that you must loosen the screws locking the position of the break, move the mechanism of the break towards the wheel so that the wheel will not rotate when break will be on again (try the adjustment with the user sitting on the wheelchair). After final adjustment secure back the mechanism with the screws.
 - gg) It is extremely important to keep all wheelchairs components clean in order to maintain the product parameters.
 - hh) Storing the wheelchair in areas with very high humidity (baths, laundry, etc.) or in the open air, also the lack of hygiene causes rapid loss of operating parameters and aesthetic of the product.
 - ii) It is unacceptable to use the wheelchair after discovering any visible or detectable damages or when the wear of some parts may cause an accident. All the repairs need to be performed by

- kk) W przypadku transportu (np. w bagażniku) nie należy wózka niczym obciążać, może mieć to wpływ na jego konstrukcję.
- ll) Chronić przed dziećmi poniżej piątego roku życia.
- mm) Nie należy wkładać palców między elementy wózka – niebezpieczeństwo zranienia lub przytrzaśnięcia.
- nn) Nie należy wkładać palców między elementy wózka – niebezpieczeństwo zranienia lub przytrzaśnięcia.
 - podczas rozkładania wózka
 - w obrębie elementów ruchomych.
 - w obszarze hamulców.

a skilled personnel and during the warranty period only by the manufacturer's service.

- jj) In case of wheelchair fitted with pumped wheels You should not exceed the maximum permissible inflation pressure of the wheels, the value is indicated on the tire wheels.
- kk) During transport (e.g. In the trunk), do not burden stroller, it may weaken or damage its structure.
- ll) Keep out of the reach of children under five years of age.
- mm) Should not insert fingers between the wheelchair components - risk of injury or entrapment.
- nn) Keep extreme caution while unfolding / folding the wheelchair. Lack of attention may result in finger entrapment:
 - when folding the wheelchair
 - in the area moving parts.
 - in the area of brakes.

7. Czynności obsługi i konserwacji / Everyday use and maintenance

ABY POSADZIĆ PACJENTA NA WÓZKU NALEŻY:

- Umieścić wózek w pozycji która ułatwi transport pacjenta (przy łóżku, fotelu, w zasięgu podnośnika).
- Zablokować oba hamulce wózka, złożyć lub zdjąć podnóżki.
- W zależności od metody przenoszenia pacjenta wyjąć właściwy podłokietnik, (zalecane jest pozostawienie drugiego podłokietnika jako poręczy dla pacjenta i zabezpieczenia przed wysunięciem się z wózka).
- Umieścić pacjenta na wózku.
- Założyć podłokietnik.
- Zamontować lub rozłożyć podnóżki, ułożyć na nich stopy pacjenta.
- Ułożyć pacjenta na wózku tak aby był w pozycji siedzącej wyprostowanej (kolana powinny być zgięte pod kątem ~90°).

SITTING ON THE WHEELCHAIR:

- Place the wheelchair in a position that will make easier transporting patient (by the bed, chair, close to lifting distance)
- Block both brakes of wheelchair, fold or remove the footrests.
- Depending on the method of moving the patient, remove the correct armrest (it is recommended to leave the second armrest as a handrail for the patient and prevent slipping out of the wheelchair).
- Place the patient the wheelchair.
- Put on the armrest.
- Install and open the footrests and put on it patient's feet.
- Place the patient on wheelchair so that the patient is in upright sitting position (knees should be bent at an angle of ~ 90 °).

PROWADZENIE WÓZKA PRZEZ OPIEKUNA

- Zawsze przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się że żadna część ciała pacjenta lub jego ubranie nie jest narażona na zaczepienie o ruchome części wózka.
- O ile pacjent nie może samodzielnie utrzymać pozycji siedzącej należy (dodatkowo) wyposażyć wózek w pasy stabilizujące (pasy w

PUSHING THE WHEELCHAIR BY CARETAKER

- Before use, make sure that no part of the patient's body or his / hers clothing is not exposed to hook with the moving parts of the wheelchair.
- If patient can not sit on one's own, wheelchair should be equipped with stabilizing belts (belts, which are in standard equipment to protect the

które standardowo wyposażony jest wózek, zabezpieczają przed zsunięciem się pacjenta z siedziska).

- Wózek należy prowadzić oburącz.

patient from sliding off the seat).

- Wheelchair should be pushed with both hands.

PORUSZANIE SIĘ PO POWIERZCHNIACH POCHYŁYCH MOVING ON SLOPES



- Poruszając się po powierzchniach pochyłych należy zachować szczególną ostrożność i ograniczyć prędkość.

- Nie należy poruszać się po zbyt dużych pochyłościach. Maksymalne dopuszczalne kąty nachylenia podłoża w górę i w dół wynosi 5%.

- Należy rozważyć możliwość skorzystania z pomocy opiekuna, jeżeli osoba na wózku nie dysponuje siłą pozwalającą kontrolować wózek, należy zaciągnąć hamulce.
- Aby zapobiec wywróceniu się podczas poruszania się po podłożu o kącie nachylenia w górę, należy lekko pochylić się w przód aby przesunąć środek ciężkości do przodu.



- While moving on slopes, use caution and reduce your speed.

- Do not move on too high slopes. The maximum allowable slope angle up and down is 5%.

- Consider the possibility of assistance from the caretaker. If the person on the wheelchair did not have enough force to control the wheelchair, the brakes must be on.
- To prevent tipping over while moving along the sloping surface, You should be slightly lean forward to move your centre of gravity forward.

ZJEŹDZANIE Z PROGÓW LUB KRAEŹNIKÓW GOING DOWN OF THE THRESHOLD OR CURBS



- Przodem bez pomocy opiekuna

- Doświadczony użytkownik wózka może samodzielnie pokonywać progi lub krawężniki.

- Z niskiego krawężnika można zjechać poruszając się do przodu. Należy upewnić się, że platformy podnóżków nie dotykają podłoża.

- Należy utrzymać równowagę na kołach tylnych, aby zmniejszyć nacisk na koła przednie
- Następnie należy pokonać krawężnik.



- Ahead without the help of a caretaker

- Experienced wheelchair user can drive on his own from the threshold or curbs.

- With a low curb, you can drive by moving forward. Make sure that the footrests platform does not touch the ground.
- Please keep balance on the rear wheels to reduce the pressure on the front wheels.
- Then cross the curb.



- Przodem z pomocą opiekuna

- Wyższe krawężniki można pokonać z pomocą opiekuna.

- Opiekun powinien lekko odchylić wózek do tyłu.


- Należy pokonać krawężnik poruszając się na tylnych kołach.
- Następnie wózek musi zostać oparty na wszystkich czterech kołach.




- Ahead with the help of a caretaker

- Higher curbs can be overcome with caretaker help.

- Caretaker should slightly tilt the wheelchair back.
- Cross the curb moving on the rear wheels.
- Then the wheelchair must be paced on all four wheels.

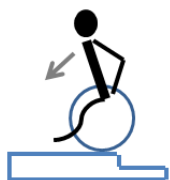

- Tyłem bez pomocy opiekuna
 - Doświadczony użytkownik wózka może samodzielnie pokonywać progi lub krawężniki.
 - Należy obrócić wózek w ten sposób aby oba tylne koła były zwrócone w stronę krawężnika
- Pochylić się do przodu, aby przenieść środek ciężkości do przodu.
- Zbliżyć wózek do krawędzi krawężnika.
- Następnie przy użyciu obręczy w kontrolowany sposób należy zsunąć wózek z krawężnika.

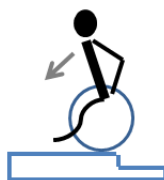

- Backwards without the help of a caregiver
 - Experienced wheelchair user can cross on his own the threshold or curbs.
 - Turn the wheelchair in such a way that both rear wheels were turned toward the curb
- Lean forward to move the centre of gravity in forward.
- Come closer with the wheelchair to the edge of the curb.
- Then, by using the handrim in a controlled manner, user must slide the wheelchair from the curb.

WJAZD NA PROGI LUB KRAWĘŻNIKI



- Przodem z pomocą opiekuna
 - Należy upewnić się, że podnóżki nie dotykają krawężnika.
 - Opiekun powinien odchylić wózek do tyłu na tyle aby unieść przednie koła nad krawężnik.
- Osoba siedząca na wózku powinna odchylić się do tyłu przenosząc środek ciężkości nad tylne koła.
- Należy wjechać przednimi kołami na krawężnik, a następnie przejechać tylnymi kołami przez krawężnik.



- Ahead with the help of a caregiver
 - Experienced wheelchair user can drive on his own from the threshold or curbs.
 - Caregiver should slightly tilt the wheelchair back.
- Wheelchair user should keep balance on the rear wheels to reduce pressure on the front wheels.
- Go with front wheels on the curb and then put the rear wheels over the curb.



- Wyższe krawężniki można pokonać jadąc tyłem z pomocą opiekuna
 - Należy obrócić wózek w ten sposób aby zwrócić wózek tylnymi kołami w stronę krawężnika.
- Osoba siedząca na wózku powinna odchylić się do tyłu przenosząc środek ciężkości nad tylne koła.
- Opiekun powinien wciągnąć wózek na krawężnik.
- Osoba siedząca w wózku powinna powrócić do normalnej pozycji w wózku



- Higher curbs can be crossed going backwards with the help of a caregiver
 - Turn the wheelchair in such a way that both rear wheels are turned toward the curb.
 - Wheelchair user should keep balance on the rear wheels to reduce the pressure on the front wheels.
- Caregiver should pull the wheelchair over a curb.
- Wheelchair user should return to its normal position on the wheelchair.



➤ Przodem bez pomocy opiekuna

- Doświadczony użytkownik wózka może samodzielnie pokonywać progi lub krawężniki.


- Należy podjechać przednimi kołami do krawędzi progu lub krawężnika.



- Ważne jest upewnienie się, że podnóżki nie dotykają progu lub krawężnika.

- Teraz można wjechać przednimi kołami na krawężnik.

- Następnie należy wjechać tylnymi kołami na krawężnik.

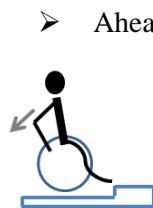

➤ Ahead without the help of a caregiver.

- Experienced wheelchair user can go down on his own from the threshold or curb.

- Place the front wheels to the edge of threshold or curb.

- It is important to make sure that the footrests do not touch the threshold or curb

- Now, can go with the front wheels on the curb.



- Then, may enter the rear wheels on to the curb.

TRANSPORT W SAMOCHODZIE

- W celu złożenia wózka dla ułatwienia transportu, należy złożyć platformy podnóżków i zdjąć podnóżki.
- Następnie należy zdjąć poduszkę siedziska i wyjąć przedłużone oparcie.
- Koniecznym jest odblokowanie barierki stabilizującej wózek i skierowanie ramion barierki do góry.
- Następnie należy pociągnąć ku górze ramy siedziska, spowoduje to złożenie wózka.
- Wózek wyposażony jest w system szybkiego demontażu kół tylnych, aby zamontować lub zdemontować koła tylne należy wcisnąć mechanizm szybkozłączki (Ilustracja 20.) koła i wysunąć lub wsunąć koło jezdne.
- Wózek należy przenosić chwytając za konstrukcję ramy. Nigdy nie należy przenosić wózka za podłokietniki lub za podnóżki.

TRANSPORT IN THE CAR

- In order to make the wheelchair easy to transport, should fold footrests platforms and remove the footrests.
- Then remove the seat cushion and higher backrest.
- It is necessary to unlock the stabilizing barrier and to point the barrier arms up.
- Then pull up the seat frame, it will submit a wheelchair.
- The wheelchair is equipped with system of quick release rear wheels.
- To install or remove the rear wheels, press the system of quick release rear wheels button (Illustration 20) and pull or push a wheel.
- The wheelchair have to be moved by holding the frame elements only. Never hold the wheelchair by the armrests or footrests.



Szybkozłaczka /
The system of quick release rear wheels

Ilustracja / Illustration 21.

REGULACJE: OPARCIE

REGULATIONS: BRAKE MECHANISM



Dźwignia hamulca dla opiekuna/
Brake handle for caretaker

Dźwignia regulacji kąta oparcia/
Backrest angle adjustment lever

Ilustracja / Illustration 22.

- Regulacji kąta oparcia należy dokonywać gdy hamulec postojowy jest włączony na obu kołach.
- W celu wyregulowania kąta oparcia opiekun powinien przycisnąć w stronę rączki obie dźwignie regulacji kąta oparcia (Ilustracja 22.) i pociągnąć do siebie oraz w dół do pożądanej pozycji oparcia.
- Aby przywrócić pierwotną pozycję oparcia należy przycisnąć w stronę rączki dźwignię regulacji kąta oparcia i podnieść oparcie.
- The brake should activated on both wheels before regulating backrest.
- To adjust the backrest angle, the caretaker should push the adjustment lever (Illustration 22.) and pull or push it to the desired position of the backrest.
- To return to the original position of backrest, press the adjustment lever and fold / unfold the backrest.

MECHANIZM HAMULCA



Dźwignia hamulca /
Brake lever

Śruby blokujące położenie mechanizmu hamulcu/
Brake mechanism screws

Hamulec /
Brake

Ilustracja / Illustration 23.

- Ilustracja 23. Przedstawia mechanizm hamulca.
- Aby włączyć hamulec należy dźwignię hamulca skierować w kierunku przedniej części do momentu w którym hamulec będzie ciasno przylegał do koła tylnego.
- Należy upewnić się, że dźwignia hamulca nie odbije samoczynnie podczas próby ruszenia wózkiem.
- Aby wyłączyć hamulec należy pociągnąć dźwignię hamulca w stronę koła tylnego.

- Illustration 23 shows the brake mechanism.
- To activate the brake, pull the brake lever towards the front wheel to the point where the brake tightly touches to the rear wheel.
- Make sure that the brake lever does not switch off when you try to move the wheelchair.
- To disable the brake, pull the brake lever toward the rear wheel.

MECHANIZM HAMULCA – SIŁA HAMOWANIA

- Aby dopasować położenie mechanizmu hamulca do położenia tylnego koła należy kluczem imbusowym nr 5 poluzować śruby blokujące, przesunąć cały mechanizm w stronę koła do takiego położenia aby po ponownym załączeniu hamulca, koło nie obracało się (test poprawności regulacji przeprowadzić na wózku z pacjentem).
- Po zakończeniu regulacji ponownie zabezpieczyć położenie mechanizmu śrubami blokującymi.

BRAKE MECHANISM – BRAKING FORCE

- To adjust the position of the brake mechanism to the rear wheel, should allen wrench 5 mm to unscrew the two screws.
- Change position the brake mechanism and tighten the screws.
- Then fasten the rear wheel to the wheelchair and check that the brake mechanism is properly adjusted to the wheel, prevents the rotation of the wheels.

PODNÓŻEK

- Aby zmienić wysokość podnóżka należy unieść go do góry, natomiast aby opuścić, należy pociągnąć dźwignię opuszczania podnóżka (Ilustracja 24.) w stronę koła tylnego.
- Oparcie łydek posiada trzy stopniową regulację.
- Aby dopasować odpowiednią wysokość oparcia łydek (Ilustracja 24.) wystarczy obrócić je do

FOOTREST

- To change the height of the footrest, lift it up. In order to lower it, pull the lever lowering the footrest (Illustration 24) towards the rear wheel.
- Calfrest has three step adjustment.
- To adjust the calfrest height (Illustration 24) just turn it to the outside and depending on the need, lift it up or lower it down and then turn it

zewnątrz i w zależności od potrzeby unieść do góry lub opuścić ku dołowi.

- Poluzowując kluczem imbusowym 5 śrubę regulacji długości podnóżka, można następnie zmienić długość podnóżka.
- Po ustaleniu odpowiedniej długości podnóżków należy dokręcić śrubę regulacji długości podnóżka.
- Długość podnóżka podlega regulacji ciągłej.
- Maksymalna długość regulacji podnóżka oznaczona jest na szynie podnóżka.

lock to the inside.


- By loosening the Allen wrench 5 footrest length adjustment screw, you can to change the length of the footrest.
- After determining the appropriate length of the footrests, you should tighten footrest length adjustment screw.
- The length of the footrest is subject to continuous regulation.
- The maximum length of footrest adjustment is marked on the rail foot.



Ilustracja / Illustration 24..

REGULACJA WYSOKOŚCI KÓLEK ANTYWYWROTNYCH

ANTI-TIP WHEELS HEIGHT ADJUSTMENT

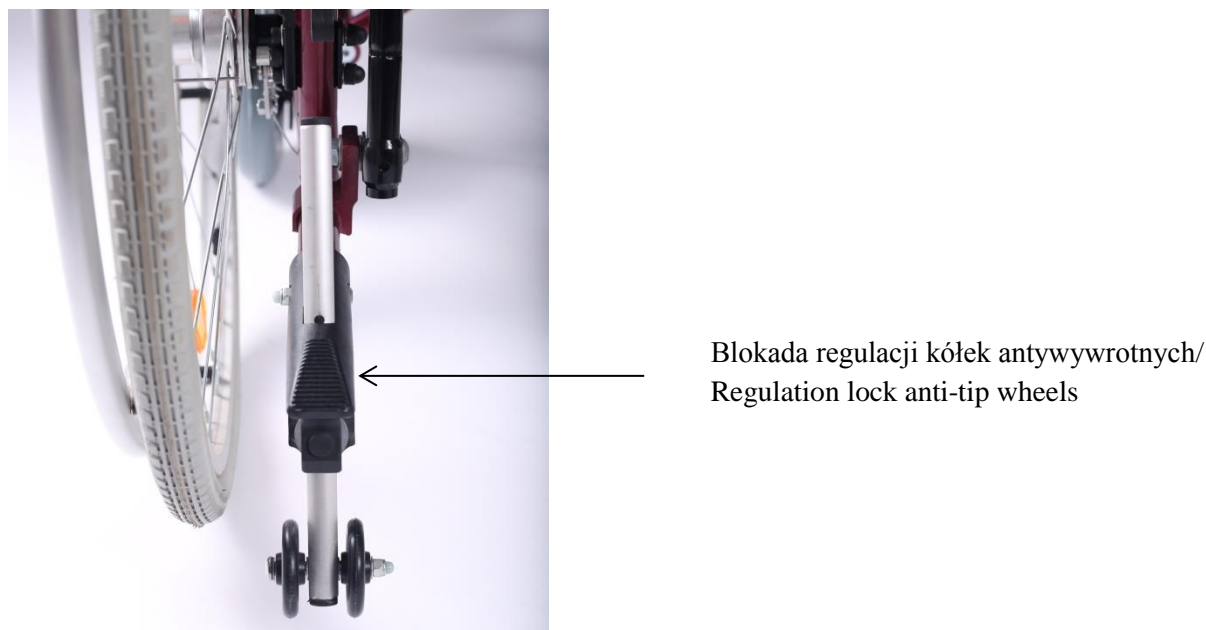


Ilustracja / Illustration 25.

- Wózek wyposażony jest w kółka antywywrotne, które pełnią istotną rolę kiedy osoba siedząca w wózku ma problem ze stabilizacją ciała.
- Wysokość kółek antywywrotnych należy dobrać indywidualnie do pacjenta w zależności do doświadczenia i pewności w poruszaniu się na wózku.
- Aby wyregulować wysokość ustawienia kółek antywywrotnych należy pociągnąć blokadę regulacji kółek anty-wywrotnych (Ilustracja 25.) znajdującą się w uchwycie kółka, ustawić pożądaną wysokość i zwolnić blokadę.

- The wheelchair is equipped with anti-tip wheels, which play an important role when a person sitting on a wheelchair has a problem with the stabilization of the body.
- The height of the anti-tip wheels should be individualized to the patient depending on experience of using wheelchair.
- To adjust the height of the anti-tip wheels pull the adjustment lock the anti-tip wheels are (Illustration 25) located in the wheel handle, set the desired height and release the lock.
- Anti tip wheel height adjustment is five-point regulation.

POMPOWANIE OPON (dotyczy wózków wyposażonych w koła pompowane)

PUMPING TYRE (It applies to stroller fitted with wheels pumped)

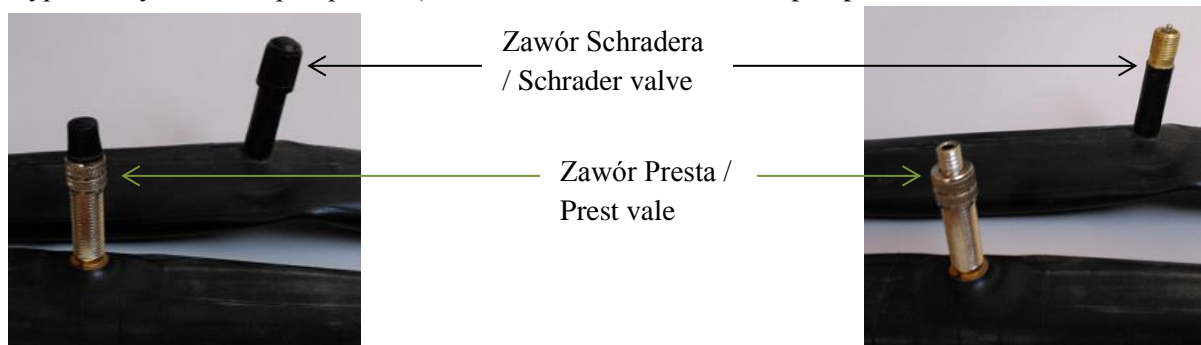

Ilustracja / Illustration 26.

Ilustracja / Illustration 27.

- Przed przystąpieniem do pompowania opon należy zidentyfikować rodzaj zaworu jaki znajduje się przy oponie. Może być to jeden z dwóch zaworków przedstawionych na ilustracji 26. i 27.
- Zawór Presta ma również dodatkową małą nakrętkę, którą przed pompowaniem należy poluzować.
- Po zidentyfikowaniu zaworu należy przygotować pompkę przeznaczoną do zainstalowanego w wózku rodzaju zaworu.
- Większość nowych pompek wyposażonych jest zarówno w obsługę zaworu typu Presta jak i Schrader. Wiele z nich pozwala na odwrócenie końcówki. Mniejszy otwór skierowany na zewnątrz będzie dotyczył Presta, większy Schrader'a. Jeśli pompka nie obsługuje Presta, trzeba będzie wyposażyć się w „adapter Presta”, który dostępny jest w każdym sklepie rowerowym.
- W tym momencie, jeśli koło zaopatrzone jest w zawór Presta, konieczne będzie

- Before pumping the tires, identify the type of valve which is located on the tire. This may be one of the two valves shown in Illustration 26 and 27.
- Presta valve also has an additional small top, which must be loosened before pumping.
- After identifying the valve, prepare the pump designed to valve type.
- Most of the new pumps are equipped to service both Presta valve and Schrader. Many of them let to reverse the tip. Smaller hole is Presta valve, Schrader valve greater. If the pump does not support Presta, you will need to buy yourself the "adapter Presta", which is available at any bike store.
- At this point, if the wheel is provided with a valve Presta, it will be necessary to unscrew the top located on the vent. It is a small top, which can be unscrewed with fingers. When doing this, the top should move upwards. Then valve is considered open.
- Then remove the plastic top from the valve and set it aside in a safe place. It is

odkręcenie nakrętki znajdującej się na wentylu. Jest to mała nakrętka, która powinna dać się odkręcić palcami. W momencie wykonywania tej czynności nakrętka powinna przesunąć się ku górze. Wówczas zawór uważany jest za otwarty.

- Następnie należy zdjąć plastikowy kapturek z zaworu i odłożyć w bezpieczne miejsce. Ważne jest, by go nie zgubić, ponieważ zawory będą ulegać zabrudzeniu, co doprowadzi do trudności w pompowaniu oraz szybszej utraty powietrza.
- Przyłożyć dyszę pompki do zaworu i sprawdzić czy właściwie przylega. W razie potrzeby wskazane jest przyciśnięcie pompki do zaworu, by powietrze nie uciekało na boki.
- Jeśli pompka posiada dźwignię z zaciskiem przy dyszy należy zacisnąć ją. Jeżeli dysza pompki oraz zaworu posiadają nagwintowaną końcówkę należy je wzajemnie wkręcić. Dzięki temu powietrze będzie wpadało prosto do dętki, a dysza nie odchodziła z zaworu.
- Przystępując do pompowania, należy sprawdzać okresowo, jak duże jest ciśnienie w oponach. Najlepiej robić to, poprzez ucisk opony kciukami na końcu bieżnika. Jeśli możliwe jest zrobienie jedynie milimetrowego wgięcia, oznacza to, że w oponie jest wystarczająco powietrza. W razie potrzeby należy kontynuować pompowanie.
- Po zakończeniu pompowania, należy wyjąć lub wykręcić dyszę z zaworu uciskając jej wylot kciukiem. Ważne jest aby uczynić to na tyle sprawnie, aby nie uciekło zbyt wiele powietrza.
- W przypadku zaworu Presta należy dokręcić uprzednio poluzowaną dodatkową małą nakrętkę.
- Należy nakręcić nakrętkę plastikową nakrętkę na zawór.

important to not lose it, because the valves will get dirt, leading to difficulties in pumping and rapid air loss.

- Place the nozzle of the pump to the valve and check if it stick properly. If it is needed, push the pump to the valve to make sure that the air does not escape to the sides.
- If the pump has a lever with clamp at the nozzle, tighten it. If the nozzle of the pump and valve have a threaded tip, screw them together. As a result, air will be streamed directly to the inner tube and the nozzle can not be detached from the valve.
- At the begining of pumping the pressure in tyres should be checked at some points. Check tire pressure with your fingers at the end of the tread. If it is possible, make only a millimeter indentation. It means that the tire has enough air. If necessary continue pumping.
- After pumping, remove or unscrew the nozzle from the valve outlet while compressing it's ends by thumb. It is recommended to do this quick enough in order to not loose too much air.
- For Prest valve, tighten previously loosened additional small top.
- Screw the plastic top on the valve.

WYMIANA OGUMIENIA (dotyczy wózków wyposażonych w koła pompowane)

Przed przystąpieniem do wymiany ogumienia należy zapoznać się z poniższymi uwagami.

W pierwszej kolejności należy wypuścić z dętki powietrze a następnie poprzez naciskanie na oponę w kierunku środka felgi poluzować kontakt opona-felga. Stosując specjalną łyżkę należy wyciągnąć rant opony na zewnątrz rawki, co umożliwi przełożenie całej ścianki opony na zewnątrz. Po tym zabiegu wyciągnięcie dętki jest już bardzo naturalne.

Przed założeniem nowej dętki prosimy zwrócić uwagę na to aby:

- taśma spodnia była nieuszkodzona i nie posiadała obcych ciał,
- ścianki zewnętrzne rawki były gładkie, bez obcych wtrąceń i innych uszkodzeń.

W razie konieczności taśmę spodnią i rawkę należy dokładnie wyczyścić.

W celu zamontowania ogumienia należy nałożyć taśmę spodnią otworem na wentyl, a następnie założyć razem do gniazda w rawce. Utrzymując takie położenie nałożyć taśmę spodnią na całym obwodzie felgi zwracając uwagę, czy nie nastąpiło przekręcenie taśmy lub czy nie uległa ona uszkodzeniu i dobrze przykrywa napinacze szprych.

Odciągając ściankę opony od rawki, włożyć wentyl do gniazda w feldze i lekko napompować dętkę tak aby uzyskała ona okrągły kształt po czym umieścić dętkę w rawce.

Dla całkowitej pewności należy sprawdzić czy dętka nie jest przekręcona (w przypadku załamania lub deformacji minimalnie dopompować powietrze). Nałożyć ręcznie ściankę opony na rawkę zaczynając od przeciwległej strony wentyla, a przy nim kończąc.

Zawsze należy sprawdzić po obu stronach koła czy dętka nie została przyciśnięta przez oponę i czy ogumienie regularnie przylega do felgi. Wentyl trzeba lekko wcisnąć do środka, a następnie wycisnąć na zewnątrz po to, aby ten dobrze osadził się w gnieździe.

Aby sprawdzić prawidłowość przeprowadzonego montażu ogumienia należy napompować tyle powietrza żeby móc kciukiem docisnąć do dna rawki. Następnie sprawdzić czy opona jednakowo przylega po obu stronach do felgi i czy jest ona centralnie ułożona. Jeżeli wystąpią takie usterki to należy wypuścić powietrze z koła i poprawić osadzenie gum. Po pozytywnej opinii należy koło napompować do maksymalnej wartości

CHANGE OF TYRES (It applies to stroller fitted with wheels pumped)

Before beginning the change of tyres it is necessary to get acquainted with the following notes.

First, it is necessary to release air from an inner tube and then by pressing a tyre in the direction of the centre of a rim to loosen a tyre-rim contact. Using a special spoon it is necessary to pull a tyre border out of the rim what will give the possibility to shift the whole wall of the tyre outside. After this operation pulling the inner tube out is very natural.

Prior to the installation of a new inner tube attention should be devoted to ensuring that:

- a bottom band is not damaged and has not foreign bodies,
- external walls of the rim are smooth, without foreign insertions and other damages.

The bottom band and rim should be precisely cleaned if need be.

To install the tyres it is necessary to put a hole of the bottom band over a valve, and then put together to a seating in the rim. Keeping such a position, put the bottom band on the whole perimeter of the rim, paying attention to ensuring that the band is not twisted or damaged and it covers spoke tighteners thoroughly.

Pulling the tyre wall away from the rim, insert the valve to the seating in the rim and slightly pump the inner tube that it achieves a round shape and then to put the inner tube in the rim.

To be sure, it is necessary to check if the inner tube is not twisted (in case of deviation or deformation, pump air additionally). Manually put the tyre wall onto the rim, starting from an opposite side of the valve and ending by it.

It is necessary to check on both sides of the wheel if the inner tube is not pressed by the tyre and if the tyre regularly adheres to the rim. The valve should be slightly pressed inside and then repressed outside that it sets well in the seating.

To check that the tyre installation is correct it is necessary to pump such air that it is possible to press a thumb to the bottom of the rim. Then, check if the tyre adheres evenly to the rim on both sides and if it is centrally arranged. If such defects occur it is necessary to release air from the wheel and correct the setting of the tyres. When an opinion is positive it is necessary to pump the wheel to the maximum pressure value and put a cap onto the valve end.

ciśnienia i nakręcić kapturek na końcówkę wentyla.

CIŚNIENIE W KOŁACH I SIŁA HAMOWANIA

- Należy dobrać do wagi użytkownika ciśnienie w kołach tylnych a następnie przy asekuracji opiekuna sprawdzić działanie hamulców postojowych (obciążony wagą użytkownika wózek ustawiony przodem w kierunku spadku, nie może się stoczyć na płaszczyźnie o nachyleniu 15%).
- Po wszystkich regulacjach należy pamiętać o dokładnym sprawdzeniu wszystkich połączeń.

UWAGI:

- Przy stosowaniu niewłaściwych narzędzi lub błędnych czynności może dojść do poważnych uszkodzeń felgi czy ogumienia;
- W razie stosowania felg z tworzywa sztucznego nie stosuje się taśmy spodniej;
- Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie montażu pomiędzy rawką a taśmą spodnia nie dostały się żadne obce przedmioty mogące uszkodzić detal czy zranić rękę;
- Należy przestrzegać właściwego stopnia napompowania kół zgodnego z wielkościami podanymi przez producenta na stronach opony;
- Należy używać pomp z manometrem lub ręczną pompkę rowerową.

CZYNNOŚCI KONSERWACJI

- Tapicerkę i ramę należy czyścić wilgotną ściereczką bez dodatku detergentów oraz innych podobnych środków.
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia np.: nici włosy itp. z ruchomych elementów wózka (koła, podnóżki).
- Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z elementów tekstylnych.
- Dla zachowania parametrów użytkowych wyrobu niezwykle ważne jest utrzymanie wszelkich jego elementów w czystości, oraz sposób przechowywania. Składowanie w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności (łaznie, pralnie itp.), lub na wolnym powietrzu, w połączeniu z brakiem higieny spowoduje szybką utratę parametrów użytkowych i estetycznych.
- Nie wystawiaj wózka na działanie ekstremalnych warunków pogodowych (deszcz,

PRESSURE IN WHEELS AND BRAKING POWER

- Pressure in wheels should be select to the user weight and then with assistance caregiver check the operation of the parking brakes (wheelchair with user facing toward the fall, can not roll on a plane with a slope of 15%).
- After all the adjustments, be sure to thoroughly check all connections.

COMMENTS

- Using improper tools or executing incorrect operation can cause serial damages of the rim or tyres;
- In case of plastic rims the bottom band is not used;
- Pay attention to ensuring that during the installation no foreign bodies get into space between a rim and bottom band what can damage a detail or injure a hand;
- Observe proper tire inflation level with the information provided by the manufacturer on the sides of the tire.
- Use a pump with a pressure gauge or manual pump cycling.

EVERYDAY USE AND MAINTANCE

- Clean the upholstery and frame with a moist cloth, without the addition of detergents and other similar chemicals.
- Systematically remove the dirt from the movable elements of the wheelchair (screws, resistance mechanisms).
- Keep clean all wheelchair elements for to save functional parameters of the product.
- Storing in rooms of very high humidity (baths, laundries etc.) or in the open air, in the combination with the lack of hygiene will cause the fast loss of functional and aesthetic parameters.
- Do not expose the wheelchair on to extreme weather conditions (rain, snow very strong sun), because certain parts can change colour.

śnieg bardzo silne słońce), gdyż pewne elementy mogą zmienić kolor.

Nie wolno stosować:

- rozpuszczalników,
- środków do czyszczenia WC,
- środków z zawartością chloru,
- ostrych szczotek i twardych przedmiotów,
- żrących środków czyszczących.

Nie czyścić wózka przy użyciu agregatów ciśnieniowych lub parowych!

You must not use:

- solvents,
- toilet detergents,
- sharp brushes and hard objects,
- detergents that contain chlorine,
- corrosive detergents,

Do not clean the wheelchair with pressure or steam aggregates!

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przegląd należy wykonywać regularnie, powinien być poprzedzony dokładnym wyczyszczeniem wózka (tak aby ujawnić ewentualne ukryte uszkodzenia) podczas przeglądu technicznego należy:

TECHNICAL REVIEW

The review should be carried out regularly, it should be preceded by thorough cleaning the wheelchair (so as to reveal any hidden damage).

Częstotliwość	Przedmiot kontroli	Uwagi
Przed pierwszym montażem	Kontrola stanu technicznego wszystkich elementów znajdujących się w opakowaniu.	Należy sprawdzić, czy żadne elementy nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych
Przed każdym rozpoczęciem jazdy	Kontrola kół i hamulców.	Hamulce mogą ulec zużyciu, należy sprawdzać stan hamulców przed każdym użyciem Należy kontrolować stan zużycia kół oraz czyścić je z kurzu i piasku.
Co dwa tygodnie	Przytwierdzenie śrub, nakrętek i pod kątem ich prawidłowego zamocowania.	Należy upewnić się czy wszystkie śruby i nakrętki są mocno dokręcone.
Co dwa miesiące	Czystość, stan ogólny.	W przypadku powstały uszkodzeń mechanicznych należy bezzwłocznie skontaktować się z wytwórcą.
Raz w miesiącu	Osie kół	Osie kół należy konserwować, napuszczając pomiędzy oś a piastę kilka kropel środka konserwującego smarującego ponadto należy unieść wózek tak aby badane koło znajdowało się ponad ziemią, koło powinno swobodnie ale bez luzów obracać się na osi jezdnej, a koła przednie także na osi kierunku.
Raz w miesiącu	Stan połączeń szybkozłącznych, gwintowych i lutowanych	Należy zwrócić uwagę na pęknięcia materiału ramy w miejscach lutowania i przy otworach blokujących połączenia bagnetowe).
Raz w miesiącu	Stan ogumienia,	należy upewnić się że bieżnik opon nie jest zużyty, oraz że opony nie posiadają widocznych uszkodzeń.

Frequency	Object of control	Comments
Before first installation	Checking the technical condition and all the elements within the packaging.	Check if any elements have any visible mechanical damage.
Before each use	Control of wheels, brakes,	The brakes can worn out, check the condition of the brakes before each use. You should also check the condition of wheels and clean them from dust and sand.
Every two weeks	Screw and nut control regarding their correct fixing.	Make sure if all the screws and top are fixed tightly.
Every two months	Cleanliness and general condition.	In case of mechanical damage contact the producer immediately.
Once a month	wheel axles	Wheel axles must be conserved, seting between the axle and the hub a few drops of lubricant preservative. In addition, make test each wheel. Raise the wheelchair so that the tested wheel was located above the ground, the wheel should rotate freely but without backlash on axle.
Once a month	State connections, threaded, soldered, the system of quick release rear wheels	Pay attention to the cracks on frame material in connections threaded, soldered, the system of quick release rear wheels.
Once a month	Condition of the tires	Make sure that the tire tread is not worn and that the tires have no visible signs of damage.

Naprawa

- W sytuacji zaistnienia konieczności wykonania napraw należy zwrócić się do wytwórcy.

Repair

- In case of reparation, please contact the producer.


Obsługa klienta




- Gdyby mieli Państwo pytania lub potrzebowali pomocy, należy zwrócić się do wytwórcy.

Customer service

- If you have any questions or need help, contact the producer.

8. Parametry techniczne / Technical paramets

Maksymalna waga użytkownika	120 kg 	Maximum user weight
Trwałość wyrobu	5 lat od daty produkcji / 5 years since production date	Usage period:
Wysokość wózka całkowita	1355 mm	Wheelchair height
Wysokość podłokietników (od siedziska)	185-275 mm	Armrest height
Szerokość wózka	685 mm	Wheelchair width
Szerokość wózka (po złożeniu)	360 mm	Wheelchair width (folded)

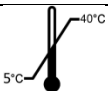Długość wózka	1200 mm	Wheelchair length
Szerokość siedziska	460 mm	Seat width
Wysokość siedziska (od podłogi)	500-560 mm	Seat height (From the floor)
Głębokość siedziska	450 mm	Seat depth
Masa wózka ze wszystkimi elementami składowymi	27 kg + / - 5%	wheelchair weight
Masa wózka bez elementów składowych	24,5 kg + / - 5%	Wheelchair weight without components
Minimalny promień skrętu	119°	Minimum turning radius
Materiały	Rama aluminiowa; tapicerka: nylon;/ Frame aluminum; upholstery: nylon;	Material
Rozmiar kół tylnych wyposażonych w system szybkiego demontażu (szybkozłączkę)	24"	Rear wheels diameter with the system of quick release rear wheels
Rozmiar kół przednich pełnych	8 "	Front Wheel Size
Maksymalne bezpieczne nachylenie terenu		Maximum safe slope
Opis środowiska w którym wyrób będzie wykorzystany		Description of the environment in which the product will be used
Temperatura przechowywania i użytkowania		Temperature of storage and use
Wilgotność powietrza do przechowywania i użytkowania	Od 30% do 70% / From 30% to 70%	The humidity for the storage and use
SN	Oznaczony na wyrobie / Printed on the product	SN
Narzędzia niezbędne do regulacji	klucz imbusowy 5 mm, klucz płaski 10mm, 13mm / Allen wrench 5 mm, wrench 10mm, 13mm	Tools necessary to adjustment

9. Symbole / Symbol



Potwierdzenie spełnienia norm UE /
Confirmation of compliance with EU standards



Wytwórca / Manufacturer



Data produkcji / Date of production



Zajrzyj do instrukcji używania / Read
the user's manual



Ostrzeżenie / Warning



Numer katalogowy / Catalog number




Numer seryjny / Serial number



humidity

Chronić przed wilgocią / Protect from

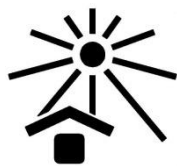

Protect from sunlight

Chronić przed światłem słonecznym /



Permitted user weight.

Dopuszczalny ciężar użytkownika /



Maksymalne bezpieczne nachylenie terenu / Maximum safe slope.



Użycie wewnątrz i na zewnątrz budynków / Use inside and outside buildings



Produkt przeznaczony do przewozu samochodem / The product is intended to transport by car.



Produkt nie jest przeznaczony do wykorzystania jako siedzisko w środku transportu /

The product is not designed for use as a seat to transport in a motor vehicle.




Niepowtarzalny kod identyfikacyjny / Unique Device Identifier



Możliwość zakleszczenia palców / The possibility of fingers jamming.



Nie stawać na podnóżku / Do not stand on the footrest

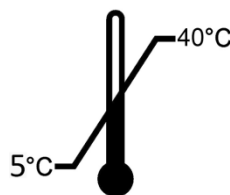

ograniczenia dopuszczalnej temperatury / Temperature of storage and use



Wyrób medyczny / Medical device

10. Dane teleadresowe \ Contact details



mdh Sp. z o.o.
ul. Maratońska 104,
94-007, Łódź, Polska
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 636 52 21
www.mdh.pl www.viteacare.com

 **MDH**[®]
Sprzęt Medyczny